Institut Clément Ader


Institut Clément Ader

Université de Toulouse



C2 - EXTENSOMETRIE CONDITIONNEUR VISHAY 2100

PRINCIPE	Mesure des déformations superficielles par variation de la résistance d'une jauge collée sur la surface de l'éprouvette (pont de Wheatstone).
TYPE/REF	Conditionneur amplificateur 2100 – Système d'acquisition D01
CONSTRUCTEUR	VISHAY
CARACTERISTIQUES	Mesure statique Boîtier de connexion rapide
CAPACITES	Entrées disponibles 9 voies d'acquisition Tension : Entrées disponibles 3 voies Etendue de mesure ± 5 volts ou 0-10 volts
Tens	Jauges: Entrées disponibles6 voies ¼ pont, ½ pont ou pont complet ion d'excitation de 0.5 à 12 volts Types de jauges120 Ω et 350 Ω Résistances de compensation incorporées Etendue de mesure ± 5000 μdéf., ±10000 μdéf., ± 20000 μdéf.

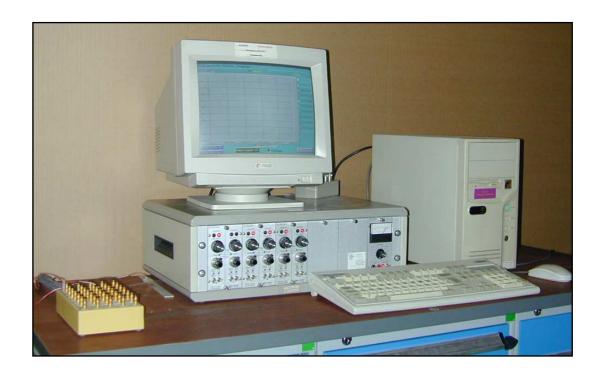

Institut Clément Ader

135, avenue de Rangueil - 31077 TOULOUSE CEDEX 4 Tél. : 33 (0)5 61 55 97 03 - Fax : 33 (0)5 61 55 99 50